

# Artone Bluetooth LoopSet

## מדריך למשתמש

### תוכן עניינים

---


- 1.....מידע כללי - תוכן עניינים
- 2.....מקשים וחלקים
- 3.....סוללה וטעינה
- 5..... הפעלה וכיבוי של ה-LoopSet
- 6..... קישוריות (Bluetooth)
- 8..... פונקציונאליות
- 10..... מפרט
- 11..... מצב/בקרה נורית
- 12..... הזהרה
- 13..... אחריות
- 15..... תעודת אחריות

## מקשים וחלקים

**הערה:** בזמן השימוש של Artone Bluetooth LoopSet המשתמש לא אמור לשמוע קול עצמי. אם יש צורך לשמוע קול עצמי, יש לעבור למצב MT במכשיר השמיע.



1. חבר את הקצה הראשון של הכבל-USB לשקע של המטען.  
חבר את הקצה השני לשקע שבתחתית המכשיר  
Artone Bluetooth LoopSet. חבר את המטען לשקע  
החשמל בקיר.
2. בזמן הטעינה נורית הבקרה דלוקה בצבע אדום. נורית הבקרה  
תכבה את עצמה לאחר סיום הטעינה.
3. זמן הטעינה רגיל עד 3 שעות. זמן דיבור עד 15 שעות,  
זמן המתנה עד 380 שעות לאחר טעינה מלאה.

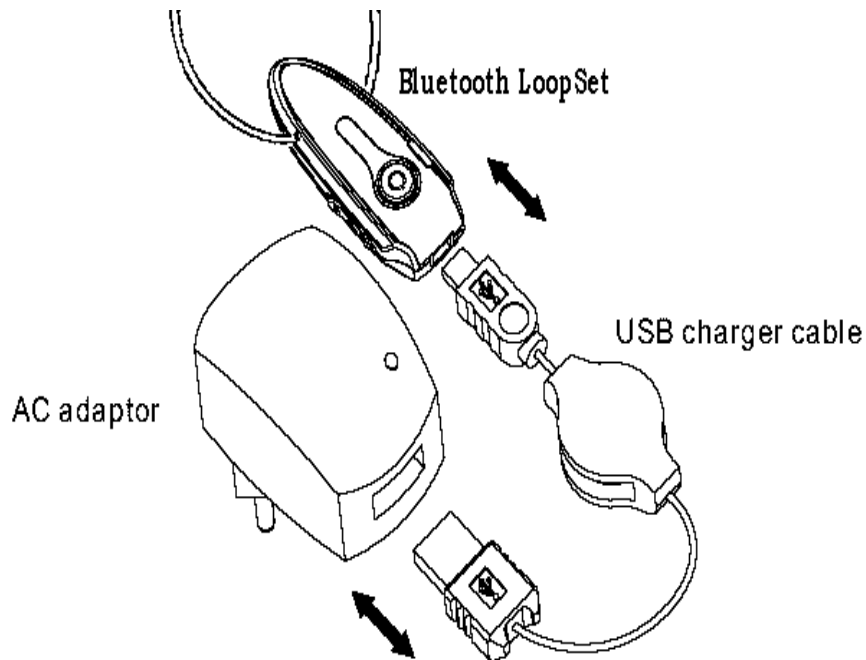

- כאשר הסוללה ריקה המכשיר ישמיע שני צפצופים והנורית הבקרה תהבהב כל 2 שניות. בזמן שהמכשיר משמיע צפצופים סימן שהסוללה ריקה ויש צורך להטעין בהקדם.

**הערה:** כאשר מחברים מכשיר שהוא דלוק לטעינה, המכשיר מבצע כיבוי אוטומטי. ניתן להפעילו שוב לשימוש בזמן הטעינה.

- השתמש רק בסוללות, במטענים שאושרו על ידי היצרן לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באבזרים אחרים יגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להזיק למכשיר. הסוללה של המכשיר היא פנימית ובלתי ניתנת להוצאה. כל ניסיון להוציא את הסוללה מהמכשיר אלול לגרום נזק למכשיר.

- כדי לוודא שהסוללה טעונה במלואה, יש להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל 30 דקות לאחר שהנורית הבקרה נכבה. (כאשר לא בוצע שום שימוש במכשיר למשך זמן ארוך מהרגיל נורית בקרה אלול לא לדלוק בצבע אדום בזמן הטעינה)

**הערה:** זמן דיבור/המתנה אלול להשתנות בהתאם לנסיבות הסביבה ומכשיר סולארי ( או כל משדר Bluetooth אחר )

**הערה:** אין לנתק את המכשיר מהטעינה על ידי משיכה בכבל, זה אלול לגרום נזק לכבל. ניתן המכשיר מתבצע על ידי אחיזה במטען.

## הפעלה וכיבוי של ה-LoopSet

---

1. כדי להפעיל את המכשיר יש ללחוץ על המקש רב שימושי למשך 3 שניות עד שהמכשיר יצפצף ונורית הבקרה תתחיל להבהב בצבע כחול.  
(בהפעלה התחלתית המכשיר יבצע קישור אוטומטי)
2. אחרי ההפעלה הנורית הבקרה תהבהב פעם אחד בצבע כחול  
כל 2-5 שניות ( לפני קישור ).
3. לכיבוי המכשיר יש ללחוץ על המקש רב שימושי למשך 5 שניות עד שהמכשיר יצפצף ונורית הבקרה תהבהב בצבע אדום 4 פעמים.

## קישוריות (Bluetooth)

---

**הערה:** יש לוודא שבוצע קישוריות עם המכשיר לפני ביצוע השיחה.

"קישוריות" – מבצע קישור בין המכשירים עם טכנולוגית Bluetooth אלהוטית ומאפשר למכשיר לזכור מספר ייחודי של ה-LoopSet. כאשר יש קישוריות בין LoopSet למכשיר, LoopSet אוטומטית מתחבר למכשיר. יש להחזיק LoopSet ואת המכשיר קרוב אחד לשני (רצוי במרחק לא יותר ממטר).

1. הפעל את ה-LoopSet על ידי החזקת כפתור רב שימושי עד הנורית הבקרה תהבהב בצבע אדום/כחול. הפעלת את ה-LoopSet גורמת לקישוריות אוטומטית עם המכשיר. (במקרה שה-LoopSet ביצע קישוריות עם מכשיר אחר, יש לנתק את הקישוריות ורק אז לבצע קישוריות עם המכשיר).

2. כדי לחפש את ה-LoopSet, בחר את המכשיר שברצונך לחבר ובצע חיפוש אביזרי העשרת שמע.

- מידע נוסף על חיפוש מכשיר עם טכנולוגית Bluetooth יש לעיין במדריך למשתמש של המכשיר.
- כאשר הסריקה הושלמה יופיע על המסך "נמצאו רשימת מכשירים".

3. בחר "Artone" מרשימת המכשירים שנמצאו ועקוב אחרי ההוראות של המכשיר.

4. כאשר על המסך של המכשיר יופיע "יש להזין סיסמא", הזינו: 0000.

לאחר אישור המסך להתבצע קישוריות בין המכשיר ל-LoopSet. (לאחר התחברות מוצלחת הנורית הבקרה תהבהב בצבע כחול)

**הערה:** יש לבצע התחברות מוצלחת בין המכשיר ל-LoopSet פעם אחת בלבד. לאחר התחברות מוצלחת, נשמר מספר ייחודי של ה-LoopSet בתוך המכשיר וניתן לצפות בו מתוך רשימת הקישוריות.

**שם לב(!):** אם הקישוריות התנתקה כתוצאת מחוץ לתווך הקליטה או המכשיר נכבה, LoopSet תנסה לייצור קישוריות במשך 20 דקות לאחר מכן תכנס למצב כיבוי אוטומטי.

כדי להתחבר שוב למכשיר יש להפעיל את ה-LoopSet. (במקרה שלא בוצע קישוריות אוטומטית בפעם הראשונה שהמכשיר הופעל, יש ללחוץ פעם אחת על הכפתור רב שימושי)

כדי לנתק את הקישוריות של ה-LoopSet עם המכשיר (למטרת התחברות למכשיר אחר), יש לכבות את ה-LoopSet או לנתק את הקישוריות מהמכשיר. אין צורך למחוק את ה-LoopSet מהמכשיר.

לאחר קישוריות מוצלחת ניתן לבצע פעולות הבאות:

### 1. הגברה/החלשה של הקול

- להגברת עוצמת הקול הקש על המקש " + " עד להשגת העוצמה הרצויה.
- החלשת עוצמת הקול הקש על המקש " - " עד להשגת העוצמה הרצויה.

ישנם 15 רמות עוצמה (ברירת מחדל - עוצמה מינימאלית). כל רמה מאומתת על ידי צפצוף והבהוב של נורית בקרה בצבע כחול ואדום. בהגעה לעוצמה מרבית נשמע אימות שני צפצופים. לשמיעה טובה עדיף לעבור לרמה מרבית שבמכשירכם הנייד. (יש לעיין במדריך משתמש של המכשיר הנייד להגברת הקול) אפשר גם להגביר את עוצמת הקול במכשיר השמיעה.

### 2. קבלת שיחה

- כאשר מתקבלת שיחה חדשה הקש על המקש רב שימושי למענה.
- (אם הטלפון נמצא במצב של מענה אוטומטי ה-LoopSet תענה לשיחה אחרי צלצול אחד)

### 3. סיום השיחה

- לחיצה בודדת על הכפתור רב שימושי בכדי לסיים את השיחה.

### 4. ביצוע שיחה

- אם המכשיר שלכם תומך ב**חיוג חוזר**, החזק את המקש " + " במשך 3 שניות עד לקבלת צפצוף, לאחר מכן שחרר את המקש " + " .
- אם המכשיר תומך ב**חיוג קולי**, החזק את המקש " - " במשך 3 שניות או לחיצה בודדת על הכפתור רב שימושי (תלוי בדגם) עד לקבלת צפצוף לאחר מכן שחרר את המקש " - " והמשך כפי שתואר במדריך המשתמש של מכשירכם.

### 5. הפעלה/כיווי של המיקרופון

- לכיווי של המיקרופון של ללחון על הכפתור רב שימושי ובנוסף על המקש " - " בו זמנית עד לקבלת צפצוף. להפעלת המיקרופון יש לחזור על הפעולה שנית.

### 6. לדחיית השיחה

- לדחיית השיחה החזק את הכפתור רב שימושי עד לקבלת הצפצוף לאחר מכן שחרר את הכפתור רב שימושי.

### 7. אתחול LoopSet

- יש לבצע אתחול רק במצבים הבאים:
    - LoopSet לא מתפקד אחרי שנטען במלואה.
    - תוכנת LoopSet צריכה אתחול.
- לביצוע אתחול יש לחבר את ה-LoopSet לשקע והטעון אותו מספר דקות.

<b>Artone Communication Solutions</b>	<b>יצרן</b>
BlueCore4 – Audio ROM	<b>שבב ראשי</b>
V2.0 + EDR	<b>Bluetooth ver.</b>
2.4Ghz~ 2.4835GHz ISM Band	<b>תדר</b>
45mW	<b>כוח בכניסה</b>
0dBm	<b>RF כוח ביציאה</b>
2Mbps ~ 3Mbps	<b>תעבורה</b>
0000	<b>סיסמא LoopSet</b>
Up to 10 Meters (30 feet)	<b>תווד קליטה</b>
5mA ~ 20 mA	<b>מתח</b>
3.6V Rechargeable Li – polymer	<b>סוללה</b>
DC 5.0V ~ 6.5V	<b>Voltage</b>
-10C ~+ 45C	<b>טמפרטורת עבודה</b>
58x32x12	<b>מידות</b>
12 גרם	<b>משקל</b>
3 שעות 15 דקות	<b>זמן טעינה</b>
עד 15 שעות	<b>זמן דיבור</b>
עד 380 שעות	<b>זמן המתנה</b>

הערה	מצב	נורית בקרה
מצב הפעלה	הבהוב נמשך 4 פעמים ונורית בקרה מהבהב 2 פעמים	כחול
מצב המתנה לפני קישוריות	מהבהב פעם אחד כל 2 שניות	
מצב המתנה אחרי קישוריות מוצלחת	מהבהב פעם אחד כל 10 שניות	
מצב העברת מידה או בזמן השיחה	הבהוב נמשך 4 פעמים כל 8 שניות	
מצב כיבוי	הבהוב נמשל 4 פעמים במהירות	אדום
מצב טעינה	נורית הבקרה דלוקה	
מראה על סוללה ריקה	מהבהבת (לא במצב הטעינה)	
מצב קישוריות (משך הפעולה עד 3 דקות)	מהבהב בתורות במהירות	כחול ואדום
סיים להטעין או מטעין את ה-LoopSet אחרי שהסוללה התרוקנה	כל הנורות הבקרה כבויות	

## מצב/בקרה נורית

מצב	שיטה	פעולה
הבהוב נמשך 4 פעמים ונורית בקרה מהבהב 2 פעמים ונשמע צפצוף	החזק כפתור רב שימושי במשך 2-4 שניות	הפעלה
הבהוב נמשך 4 פעמים במהירות ונשמע צפצוף	החזק כפתור רב שימושי במשך 5 שניות	כיבוי
מהבהב בתורות במהירות	החזק כפתור רב שימושי במשך 2-4 שניות	קישוריות
אפשרות לשיחה אחרי צפצוף ונורית בקרה תהבהב ושניהם כחול ואדום תהבהב כל אחד פעם אחד	הקש על הכפתור רב שימושי	קבלת שיחה
צפצוף ושני נוריות בקרה כחול ואדום תהבהב פעם אחד	לחץ על המקש " + "	הגברת עוצמת הקול
צפצוף ושני נוריות בקרה כחול ואדום תהבהב פעם אחד	לחץ על המקש " - "	החלשת עוצמת הקול
צפצוף ושני נוריות בקרה כחול ואדום תהבהב פעם אחד	הקש על הכפתור רב שימושי	סיום שיחה
מחייג את המספר האחרון שחיוג אחרי הצפצוף	הקש על המקש " + " למשך 3 שניות	חיוג חוזר

אזהרה:

לא להשתמש ליד מכונות כלשהן, הלולאה עלולה להילכד בחלקים הנעים.  
נא להביע זהירות בעת שימוש בלולאה כדי שלא תיתפס בשום דבר! דבר זה עלול לגרום לפציעות.

\*\*\*

אין להשתמש (בלולאה) LoopSet אם את/אתה משתמש קוצב-לב או כול מכשיר אחר שעשויים להיות רגישים לשדה מגנטי / השראי.

\*\*\*

\*חלקים של (לולאה) Artone Bluetooth LoopSet יכולים ליצור שדה מגנטי, בבקשה לא למקם את הלולאה ליד כרטיס אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים, המידע עלול להימחק.

\*\*\*

להרחיק מידיהם של ילדים.

## אחריות

### אחריות

(ארטון) Artone, כמוגדר להלן, מקנה אחריות למוצר זה ממותג ארטון נגד פגמים בחומרים ועל טיב העבודה תחת שימוש רגיל במשך שנה מיום הרכישה הקמעונאית ל לקונה ("המשתמש" - תקופת האחריות. אם נתקבלה תביעה פגם חוקית למוצר בתוך תקופת האחריות, לפי שיקול של, -ארטון Artone להחליף את המוצר עם אחד חדש או אם ניתן לתקן את המוצר.

האחריות אינה מכסה התעללות, נזק מכוון, שימוש רשלני, וכל נזק שנגרם העולה על הקווים של "שימוש רגיל" במוצר. כל מוצר שבו המספר הסידורי נפגם, עבר שינוי, או הוסר. כל סוג של נזק או חוסר תפקוד הנובעים מן האירועים הבאים: תאונה, שימוש בלתי נכון, הזנחה, שריפה, מים, ברק או שאר פגעי טבע, התאמה, שינוי או תיקון בלתי מוסמך של המוצר, או כישלון במילוי ההוראות המסופקות עם המוצר.

תיקון או ניסיון תיקון ע"י כל אדם שאינו מוסמך לדבר ע"י ארטון. סיבות חיצוניות למוצר כמו תנודות או הפסקות בזרם החשמל.

מסמכים דרושים: בכל תביעת אחריות המשתמש חייב להציג חשבונית של רכישה ומסמך זה עם חותמת היצרן וחותמת המוכר.

תביעת אחריות לא תתקבל ללא מסמכים הדרושים.

האחרות תקפה רק עבור הלקוח הראשון שביצע את הרכישה.

### מגבלות אחריות

אחריות מוגבלת של ארטון קובעת כי, בכפוף למגבלות הבאות, כל מוצר יהיה חופשי מפגמים בחומר.

### הגבלת פיצויים

פיצוי הבלעדי של הקונה עבור מוצרים פגומים כלשהם, מוגבל לתיקון או החלפה של המוצר הפגום.

ARTONE (ארטון) - עשוי לבחור בפיצוי או שילוב של פיצוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של (ארטון).  
לארטון Artone יהיה זמן סביר לטפל בתביעת האחריות של מוצר. האחריות חלה על המוצרים המתוקנים עבור יתרת תקופת האחריות של החלקים המקורים.

### הגבלת נזקים

ARTONE (ארטון) הפיצוי או כול תמורה אחרת בשום מקרה לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

### הגבלות על אחריות משתמעת:

אין כתבי אחריות, אם ברורה או משתמעת המקיפים מעבר לתיאור המפורט כאן, כולל האחריות המשתמעת של הסחורה וכשירותה למטרה מסוימת.

מניעת נזקים:

האחריות של ארטון מוגבלת למחיר התיקון או ההחלפה, ארטון לא תישא באחריות של המוצר במקרים הבאים:  
נזק לרכוש אחר שנגרם ע"י פגם כלשהו במוצר, נזקים המתבססים על חוסר נוחות, חוסר שימוש במוצר, בזבוז זמן הלקוח, הפסד רווחים, איבוד אפשרויות עסקיות, בזבוז רצון טוב, פגיעה בפעילות עסקית או כל הפסד עסקי בכל צורה שהיא שנובעת מהתקלה. כל תביעה שיש מהפגם או התקלה של מוצר זה על ידי

צד שלישי ללא קשר למהות התקלה.

הגבלה של נזק תוצאתי או אחר,

אף דבר אחר של מדיניות זו או אחרת, ARTONE (ארטון) לא תהיה אחריות ביחס למוצרים תחת כל חוזה, רשלנות, חמורה חבות או תיאוריה משפטית אחרת, בגין כל סכום העולה על מחיר הרכישה עבור או למוצר פגום, הבור כל הפסד כללי, תוצאתיים, עונשיים, מקריים או נזקים מיוחדים. זה כלל אובדן של אובדן רווחים, ההתקנה של החלפת מוצרים, כל בדיקה, בדיקה, כל פגם נוצר על ידי תיקון או החלפה של מוצרים הנובעת מפגם במוצר. אין אחריות משמרת מעבר ל- ARTONE (ארטון), האחריות המוגבלת. ארטון מסירה מעצמה כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, אודות המוצרים, לרבות אחריות משתמעת לסחירות, התאמה לשימוש מסוים תכלית או אי הפרה.

**תעודת אחריות ל-ARTONE BLUETOOTH LOOPSET**

המוצר	
מס' סידורי	תיאור
שנת יצור	הדגם

פרטי הרכישה	
מקום הרכישה	תאריך
פרטי המוכר	

היצרן <input type="checkbox"/> היבואן <input type="checkbox"/>		
מס' זהות/מס' תאגיד	שם מסחרי	שם
פקס	טלפון	כתובת
הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות		