


Artone Bluetooth Loopset (BTLS) . Návod k použití + záruční list

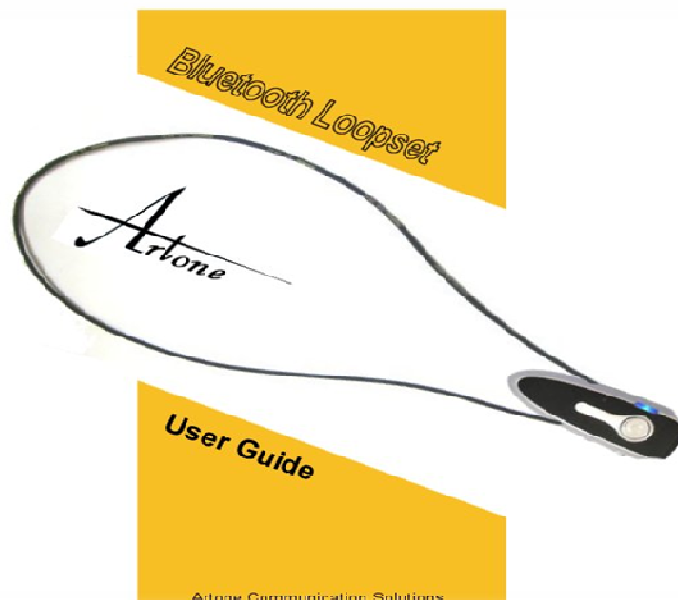

Existuje několik jednoduchých kroků, které je třeba provést, aby vám Artone Bluetooth Loopset pohodlně sloužil.

- 1) Nabijte BTLS. První nabití trvá přibližně 3 hodiny.
- 2) Spárujte váš BTLS s telefonem nebo jiným zařízením.
- 3) Naučte se ovládat BTLS

Všechny kroky jsou podrobně popsány v návodu

Poznámka:

Aby bylo možné BTLS používat ujistěte se, že vaše naslouchátko je v poloze T-coil (indukční přijímač) Ujistěte se, že váš telefon podporuje bluetooth. Po spárování přístrojů můžete dát BTLS okolo krku, zvýšit hlasitost a začít BLTS používat.

Obsah

Úvod	3
Popis BTLS	4
Nabíjení	4-5
Zapnutí/vypnutí	6
Spárování	6-7
Odpojení	7
Ovládání	7-8
Údržba	8
Duševní vlastnictví	8
Technické informace	9
Zacházení	10-11
Upozornění	11-12
Záruka	12-13
Záruční list	14

Úvod

Uživatel naslouchátka má problém s mobilní komunikací z několika důvodů. Hlavním důvodem je tvoření se rušivých zvuků, které vznikají, když se telefon přiblíží k naslouchátku. Artone BTLS umožní uživatelům naslouchátek předejít rušivým zvukům přemístěním telefonu do „bezpečné“ vzdálenosti od naslouchátka. V momentě hovoru se signál z mobilního telefonu bezdrátově přenese do BTLS, kde se zpracuje, vyčistí, zesílí a následně je přeposlán do naslouchátka. Naslouchátko signál zpracuje a přizpůsobí dle přání uživatele.


Při výstupu, mikrofon na BTLS zachytí signál, zpracuje ho, vyčistí, zesílí a pošle signál do telefonu. Tento proces umožní oběma hovořícím komunikovat bez problému. Celý postup je bezdrátový a nezaměstná vaše ruce.

Současná verze Artone BTLS podporuje profily 2.0 + EDR handsfree a sluchátka s bluetooth technologií V 1.0 a V 1.2

Poznámka:


Během hovoru byste neměli slyšet vlastní hlas. Pokud potřebujete slyšet vlastní hlas tak přepněte naslouchátko do režimu MT.

Popis Artone BTLS

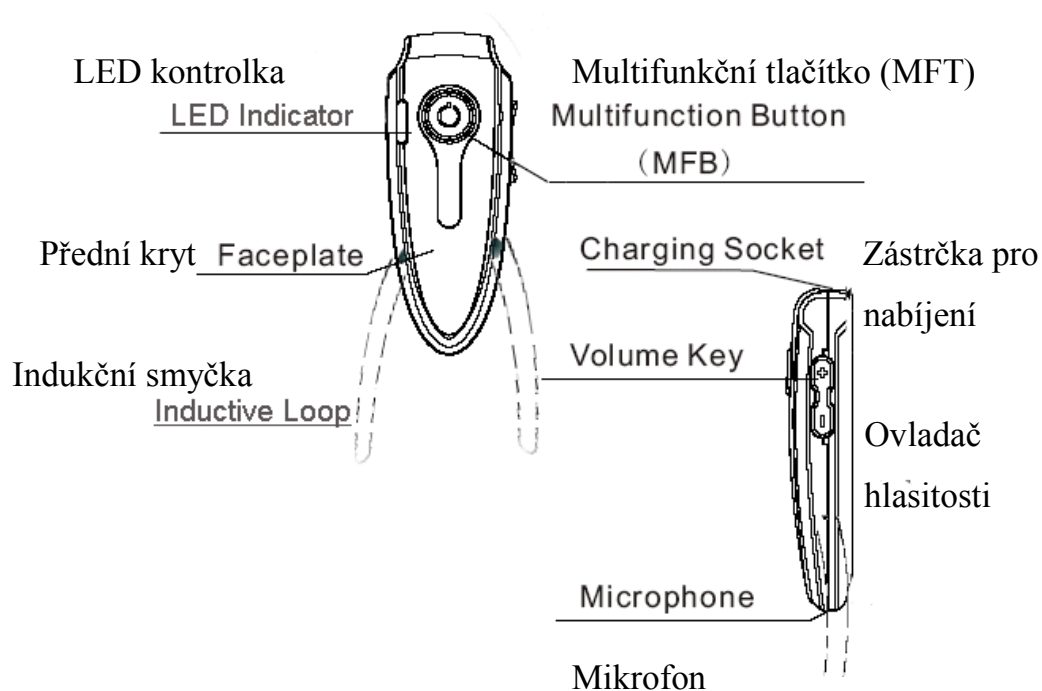

Nabíjení Artone BTLS

- 1) Spojte správný konec USB kabelu s AC adaptérem. Druhý konec kabelu zapojte do BTLS. Zapojte AC adaptér do elektrické zásuvky.
- 2) Během nabíjení LED kontrolka svítí červeně. LED kontrolka se automaticky vypne když je baterie nabitá.
- 3) Čas nabíjení zabere obvykle 3 hodiny. Baterie vydrží přibližně 15 hodin hovoru. V pohotovostním režimu vydrží 380 hodin.

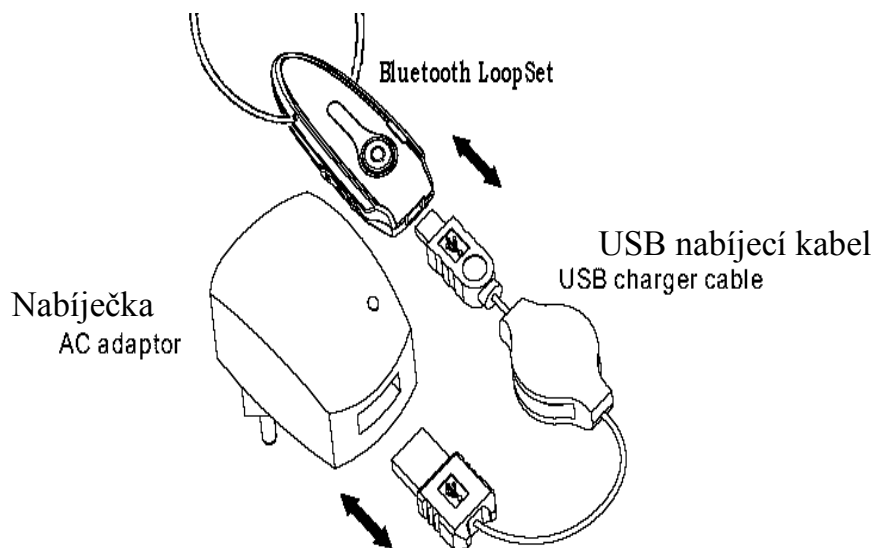

Poznámka:

Když BTLS dochází baterie tak BTLS pípá, a červená LED kontrolka bliká každé 2 sekundy. Když přístroj pípá, baterie je vybitá a potřebuje dobít. Pokud dáte BTLS nabíjet když je zapnutý automaticky se vypne. BTLS můžete znovu zapnout a používat i během nabíjení.

Používejte pouze baterii a nabíječku schválenou výrobcem. Použití jiných typů může být nebezpečné a záruka se stává neplatnou. Přístroj má vnitřní neodnímatelnou nabíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii z přístroje vyndat, může dojít ke škodě.

Pokud chcete mít jistotu, že je BTLS zcela nabitý, nechte baterii ještě 30 minut poté, co se vypnula LED kontrolka. (kontrolka nabíjení nemusí svítit červeně během nabíjení, pokud přístroj nebyl dlouhou dobu používán)

Výdrž baterie závisí na okolních podmínkách a na mobilním telefonu nebo jiném bluetooth přenašeči. Při manipulaci s nabíječkou uchopte konektor, netahejte za kabel, můžete ho poškodit.

Zapnutí a vypnutí Artone BTLS

- 1) Pro zapnutí BTLS podržte MFT na cca 3 sekundy dokud BTLS nepípne a LED kontrolka se rozsvítí modře. (Při prvním použití tento postup začne automaticky proces spárování)
- 2) Modrá LED kontrolka bude blikat každých 2-5 sekund po zapnutí (před spárováním)
- 3) Pro vypnutí stiskněte MFT po dobu 5 sekund dokud BTLS nepípne a LED kontrolka zabliká 4krát.

Spárování Artone BTLS

Poznámka:

Než začnete hovor, spárujte BTLS s telefonem. Spárování vytvoří kanál mezi přístroji pomocí bezdrátové technologie bluetooth a umožní telefonu se zapamatovat jedinečné ID BTLS. Jakmile jsou BTLS a telefon spárovány BTLS se automaticky připojí k vašemu telefonu.

- 1) Přiblížte BTLS a telefon přibližně 1m od sebe.
- 2) Zapněte BTLS přidržetím MFT, spárovací proces začne automaticky. (Pokud je BTLS spárován s jiným přístrojem přerušete nejdříve toto spojení)
- 3) Proveďte hledání zařízení v telefonu. Pro detaily jak používat telefon najdete v návodu k telefonu. Když je hledání ukončeno zobrazí se nápis: zařízení nalezeno.
- 4) Z nalezených zařízení vyberte „ARTONE“ a potvrďte.
- 5) Pokud telefon vyžaduje kód, zadejte „0000“ a potvrďte pro spárováním s BTLS. Nyní si telefon pamatuje ID zřízení. Spárování bylo úspěšné pokud BTLS LED kontrolka bliká modře v krátkých intervalech.

Pokud se spojení mezi telefonem a BTLS přeruší např. kvůli dosahu nebo při vybití telefonu, BTLS se zkouší znovu připojit automaticky. Pokud je přerušení delší než 20 minut BTLS se automaticky vypne.

Odpojení Artone BTLS

Pro odpojení BTL z telefonu vypněte BTLS nebo ho odpojte v menu telefonu.

Ovládání Artone BTLS

Nastavení hlasitosti – pro zvýšení nebo snížení hlasitosti mačkejte opakovaně tlačítko „+“ nebo „-“.

Počáteční hlasitost je nastavena na minimum. Hlasitost má 15 úrovní. Každá změna je potvrzena pípnutím rozsvícením modré a červené LED kontrolky. Pro nejkvalitnější poslech nastavte hlasitost telefonu na maximum. Použijte také ovladač hlasitosti na naslouchátku.

Přijmutí příchozího hovoru – pro příjem hovoru stiskněte MFT. Pokud je váš telefon nastaven na automatickou odpověď BTLS přijme hovor po prvním zazvonění.

Ukončení hovoru – pro ukončení hovoru stiskněte MFT

Uskutečnění hovoru – pokud váš telefon podporuje opětovné vytáčení, zmáčkněte tlačítko „+“ na BTLS na 3 sekundy dokud nepípne, potom tlačítko „+“ uvolněte.

Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení, zmáčkněte tlačítko „-“ (nebo krátce stlačte MFT – záleží na verzi přístroje) dokud BTLS nezapípá, potom ladítko uvolněte a postupujte podle návodu telefonu.

Vypnutí zvuku – stiskněte současně MFT a „-“, tlačítka dokud BTLS nepípne. Pro zapnutí zvuku postup opakujte.

Odmítnutí hovoru – zmáčkněte MFT dokud přístroj nepípne. Uvolněním tlačítka hovor odmítnete.

Restartování Artone BTLS

BTLS byl měl být restartován pokud

- nefunguje správně po plném nabití
- BTLS software potřebuje restartovat

Zapojte BTLS do nabíječky a po několika sekundách nabíječku odpojte, tím se BTLS vynuluje.

Péče o Artone BTLS

- nevystavujte BTLS mokru a vlhku
- nevystavujte BTLS tepelným zdrojům, ani nenechávejte na přímém slunci
- nepokoušejte se BTLS otevřít

Nedbalost vůči těmto zásadám a následné poškození přístroje nepodléhá záruce.

Duševní vlastnictví

- Bluetooth je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG Inc.
- Artone™, Artone Communication Solutions™ a Artone Bluetooth Loopset™ a loopset design je duševní vlastnictví Artone Communication Solutions a nesmí být nijak užito bez písemného souhlasu Artone Communication Solutions.

Technické informace

Výrobce	Artone Communication Solutions
Hlavní čip	BlueCore4 – Audio ROM
Bluetooth verze	V2.0 + EDR
frekvence	2.4Ghz~ 2.4835GHz ISM Band
Napětí input	45mW
RF out napětí	0dBm
Přenos dat	2Mbps ~ 3Mbps
BTL kód	0000
Dosah smyčky	Do 10 metrů (30 stop)
napájení	5mA ~ 20 mA
baterie	3.6V dobíjecí Li – polymer
volty	DC 5.0V ~ 6.5V
Provozní teplota	-10C ~+ 45C
rozměry	L58 X W23 X H12
váha	12g
Čas nabíjení	3 hodiny 15 minut
Čas hovoru	až 15 hodin
Pohotovostní režim	380 hodin

Popis úkonu a zobrazení LED kontrolky v závislosti na úkonech

LED	stav	poznámka
modrá	LED kontrolka zabliká 2krát, 4krát po sobě	Režim zapnutí
	Jednou zabliká každé 2 sekundy	Pohotovostní režim před spárováním
	Zabliká jednou každých 10 vteřin	Pohotovostní režim po spárování
	4krát bliká každých 8 sekund	Přenos dat nebo probíhající hovor
červená	4krát rychlé blikání	Režim vypínání
	Kontrolka svítí	nabíjení
	Svítí a nenabíjí se	Značí slabou baterii
červená & modrá	Rychle bliká	Režim spárování (asi 3 minuty)
	Kontrolka nesvítí	Baterie nabitá nebo nabíjení úplně vybité baterie

Časové intervaly a kontrolka LED se mohou lišit podle stavu nabití baterie.

akce	postup	stav
zapnutí	Zmáčkněte MFT po dobu 2-4 sekund	Modrá LED zabliká 4krát a červená LED zabliká 2krát, uslyšíte pípnutí
vypínání	Držte MFT po dobu 5 sekund	Červená LED zabliká 4krát a slyšíte pípnutí
spárování	Dlouze stiskněte MFT po dobu 2-4 sekund při prvním použití	Červená a modrá LED bliká střídavě

akce	postup	stav
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko „+“	LED zabliká jednou červeně a modře (15 stupňů hlasitosti), jednou pípne
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko „-“	LED zabliká jednou červeně a modře, jednou pípne
Ukončení hovoru	Stiskněte MFT	LED zasvítí jednou červeně a modře, jednou pípne
Opětovné vytáčení	Stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 sekund	Znovu vytočí poslední volané číslo, po pípnutí
Přijmutí hovoru	Stiskněte MFT	Hovořte, jakmile uslyšíte signál, LED zabliká jednou červeně a modře

Upozornění:

Nepoužívejte Artone BTLS v blízkosti strojů, kde je riziko, že se smyčka může být zachycena pohybujícími se součástmi. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání čehokoliv, kde se smyčka může zachytit a způsobit zranění.

Nepoužívejte BTLS pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné zařízení, které může být citlivé na magnetické/indukční pole.

Části BTLS mohou být magnetické, proto nepokládejte v blízkosti BTLS kreditní kartu a jiné záznamové medium, vložená data mohou být ztracena.

Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení vozidla.

Držte z dosahu dětí !

Záruka

Artone ručí (produkty řádně označené Artone), za vady na materiálu a vady řemeslné projevené za běžného používání. Tato záruka je platná 2 roky od data koupě výrobku zákazníkem. Pokud se projeví vada a je uplatněn nárok do 2 let od koupě výrobku, Artone zváží, zda výrobek nahradí novým nebo přístroj opraví.

Záruka se nevztahuje na zneužití, úmyslné poškození, poškození z nedbalosti a další škody způsobené jiným užíváním výrobku než je považováno za normální. Žádost nároku na opravu být podložena dokladem o koupi výrobku opatřena razítkem prodejce.

Omezení náhrady

Jakákoliv náhrada za vadný produkt je omezena na opravu nebo výměnu vadného přístroje. Je v pravomoci Artone rozhodnout, který prostředek nebo kombinaci prostředku zvolí k nápravě vad. Artone se zavazuje vyřídit požadavek v přiměřené lhůtě. Náhradní výrobek může být zhotoven se starších nebo nových součástí.

Omezení náhrady škod

Odpovědnost za škody vzniklé na výrobcích Artone nebo způsobené výrobky Artone nemůže v žádném případě překročit hodnotu koupeného výrobku. Omezení platí také pokud Artone nemůže vyměnit nebo neopraví vadný výrobek. Žádné následné ani další škody vzniklé ve spojení s Artone výrobkem nemohou být uplatňovány za žádných podmínek. Toto omezení nemůže být anulováno smlouvou, nedbalostí ani přímou odpovědností ani jiným způsobem.

Nemůže být vyžadována náhrada škody, škody za ušlý zisk, škody vzniklé instalací ani testováním. Jiná záruka než Artone limitovaná záruka nemůže být uplatněna.

Artone se zříká jakýchkoliv jiných záruk týkajících se výrobku.

Vyrobeno v Izraeli.

Záruční list

Sériové číslo výrobku:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího:

Upozornění

Při nákupu produktu se ujistěte, že je Záruční list řádně vyplněný. Předejdete tak možným komplikacím při případné reklamaci.

Sound Power s.r.o.