




Artone soluzioni di comunicazione


Artone 3 MAX & TVB

www.artonecs.com

Iniziale veloce manuale d'uso

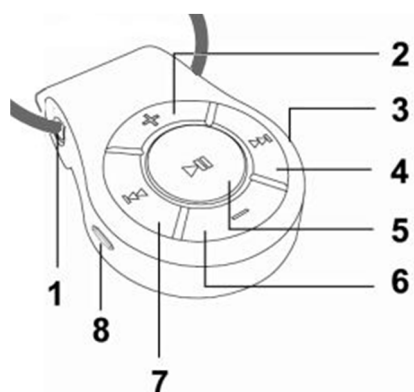

- 1. Neckloop**
- 2. Volume +**
- 3. Microfono**
- 4. Avanti/Il prossimo**
- 5. Pulsante multifunzionale (MFB)/ pulsante play/pulsante pausa**
- 6. Volume -**
- 7. Indietro/ L'ultimo**
- 8. Porta di ricarica**

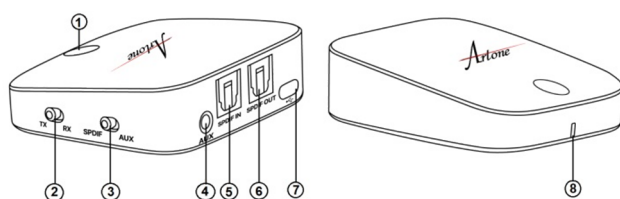

- ① Pulsante d'accensione**
- ② Trasmittitore (TX) / Ricevitore (RX) / Commutatore del modo**
- ③ Uscita SPDIF / AUX Commutatore del modo**
- ④ 3.5mm porta Audio**
- ⑤ Ingresso Audio Ottico**
- @ Uscita Audio Ottica**
- ⑦ Porta di ricarica**
- ⑧ Indicatore LED**

Avvertimento

- **L'apparecchio è molto alto, iniziare sempre dal minimo del volume**
- **Non piegare o torcere il loop estensivamente! Piegare o torcere il loop può causare i danni al prodotto e invalidare la garanzia.**
- **Non usare vicino al macchinario, perché il loop poi potrebbe rimasto impigliato nelle parti in movimento.**
- **Consultare con il vostro medico prima di utilizzare l'apparecchio, se utilizzassi pacemaker oppure altro l'apparecchio che potrebbe essere sensibile con i campi magnetici/induttivi.**

- ***Esprimere extra attenzione mentre guida, e obbedire ai vostri leggi dello stato riguardo di utilizzo del cellulare mentre guidare.**

- **Tenere lontano dalla portata dei bambini.**

Per utilizzare il Artone 3 MAX e TVB set.

1. Caricare il Artone 3 MAX

Prima del primo utilizzo, caricare completamente tutti e due i dispositivi per 2-3 ore.

- 1) Collegare porte di ricarica (7) con una fonte di energia (caricabatteria USB). Quando si carica il LED rosso si accende.

Istruzioni di ricarica TVB

- 2) Collegare porte di ricarica (8) con una fonte di energia (caricabatteria USB). Quando si carica il LED rosso si accende.

L'accoppiamento Artone 3 MAX e TVB

Sul Artone 3 MAX dallo stato OFF, premere e tenere premuto il MFB (5) pulsante sul Artone 3 MAX fino a quando i luci rosso e blu iniziano a lampeggiare alternativamente.

Il TVB

1. Assicurare il TVB è impostata su modalità TX e che il dispositivo sia spento.
2. Collegare il TVB al televisore con il cavo giusto.
3. Accendere il TVB e impostare la modalità di accoppiamento (premere il pulsante di accensione per 2 volte).

La distanza tra il Artone 3 MAX e il TVB deve essere 1 metro una dall'altra. I dispositivi si collegano automaticamente dopo alcuni secondi.

Come utilizzare Artone 3 MAX con il tuo cellulare

Come attivare

Mentre il Artone 3 MAX è spento, premere e tenere premuto il pulsante MFB fino a quando il LED blu inizia a lampeggiare.

Come attivare la modalità di accoppiamento

Quando il Artone 3 MAX è spento, premere e tenere premuto il pulsante MFB fino al blu e indicatore LED rosso inizia a lampeggiare alternativamente. Il Artone 3 MAX entrerà in modalità di accoppiamento.

Accoppiamento con il telefono cellulare

Artone 3 MAX e il telefono cellulare devono essere l'uno dall'altro a non di 1 metro di distanza, Premere il pulsante MFB sul Artone 3 MAX fino a quando le luci il rosso e il blu iniziano a lampeggiare alternativamente. Sul telefono cellulare, nel menu Bluetooth attivare la funzione di ricerca, "trovare il nuovo dispositivo", scegli "Artone 3 MAX" da dispositivi trovati elenco, seguendo le istruzioni sullo schermo. Nel caso in cui il telefono chiede una chiave di accesso introdurre 0000 (quattro zeri).

Trovare la versione completa di istruzioni per l'uso: www.artonecs.com/ifu